

OTORIG[®]

NASAL SPRAY

Shock therapy of nasal mucosa

with



OTORIG[®] NASAL SPRAY is a protective, decongestant and sanitizing medical device of nasal cavities specific for prevention and treatment of nasopharyngeal affections both acute and chronic in case of irritation, swelling, itching, burning, excessive mucus production. Creates a protective mucoadhesive lipidic film hostile to microbiota alterations and restores the good condition of the nasal mucosa.

MAIN COMPONENTS

Ozoile[®](Stable Ozonides), Aqua (Ozonized), Menthol, Sodium Chloride.

OZOILE[®]

It acts on the irritative and itchy state, brings oxygen on site and creates an unfavorable environment to microbiota alterations. Contrasts redness, itching, burning, swelling, desquamation and degenerative processes in progress.

MENTHOL

Refreshing analgesic action, gives a relief sensation.

SODIUM CHLORIDE

Its presence in solution promotes the attraction of osmosis water from the congested mucosa and it fluidifies the mucus, facilitating its removal.


INSTRUCTIONS

Otorig[®] nasal spray with Ozoile[®] is a protective, decongestant and sanitizing medical device of nasal cavities, specific for prevention and treatment of both acute and chronic nasopharyngeal affections characterized by irritation, swelling, itching, burning, excessive mucus production. Innovative formula, it is a valid help in case of flu syndromes, caused by cooling, allergic or environmental pollutants and surgical after-effects in ORL. Otorig[®] nasal spray decongests the nasal passages, reduces the obstruction and regularizes secretions by promoting an osmotic exchange which favors the attraction of fluids from the mucosa and it fluidifies the mucus, facilitating its removal. Its formulation with Ozoile[®] keeps the mucosa well hydrated and it has an important sanitizing and protective action creating a mucoadhesive lipidic film hostile to microbiota alterations, that restores the good condition of the nasal cavities.


HOW TO USE

1) Remove the transparent protection cap (a) and the classic spray dispenser (b) by pulling upwards.

2) Place the nasal spray dispenser on the plunger (c).

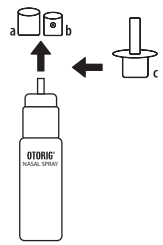

Apply Otorig[®] Nasal Spray as needed 1 or 2 puffs per nostril, blow the nose gently, then repeat the application.

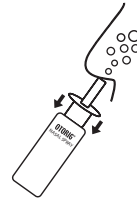

It is recommended to use the product more times during the day even at close range. Before going to bed, repeat the dispensing. Rinse the dispenser at the end of each use by positioning it under a jet of hot water, then cover the dispenser with the protective cap. Since it is a natural product, thanks to its no pharmacological mechanism of action, it is not addictive and can be used frequently and for prolonged periods.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Keep out of the reach of children. Do not use the device beyond the expiration date. Do not use it if the packaging appears to be damaged. Avoid the contact with eyes, in case of accidental contact rinse thoroughly with water.

There are no cases of sensitization or side effects, if this phenomenon occurs please discontinue use and consult your physician. Wash your hands well before using the medical device. Carefully close the bottle after use. Store in a cool, dry place, away from heat sources and direct sunlight. The expiration date refers to the intact and correctly stored product. After opening it is recommended to use the product within 6 months.

PACKAGE

Bottle 0.7 fl. OZ.

GLUTEN FREE
NO ALLERGENS
NO COLOURS

ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 03 01/2023



OTORIG®

PRŠILO ZA NOS

**Učinkovito
zdravljenje
nosne sluznice**

Z



PRŠILO ZA NOS OTORIG® je zaščitni dekongestivni in razkužilni medicinski pripomoček za nosne votline, posebej učinkovit za preprečevanje in zdravljenje akutnih in kroničnih nosno-žrelnih obolenj v primeru draženja, otekanja, srbenja, pekočega občutka in čezmernega izločanja sluzi. Ustvari zaščitni mukoadhezivni lipidni film, ter neugodno okolje za spremembo mikrobiote in obnovi stanje nosne sluznice.

GLAVNE SESTAVINE

Ozoile® (stabilni ozonidi), voda (ozonizirana), mentol, natrijev klorid.

OZOILE®

Deluje na dražeče in srbeče stanje, mesto oskrbi s kisikom in ustvari neugodno okolje za spremembe mikrobiote. Deluje proti rdečici, srbenju, pekočemu občutku, oteklini, luščenju in razvoju degenerativnih procesov.

MENTOL

Osvežujoče analgetično delovanje, daje občutek olajšanja.

NATRIJEV KLORID


Njegova prisotnost v raztopini spodbuja prehajanje osmotske vode iz kongestirane sluznice in utekočinja sluz, kar olajša njeno odstranitev.

NAVODILA

Pršilo za nos Otorig® je zaščitni dekongestivni in razkužilni medicinski pripomoček za nosne votline, posebej učinkovit za preprečevanje in zdravljenje akutnih in kroničnih nosno-žrelnih obolenj z znaki draženja, otekanja, srbenja, pekočega občutka in prekomernega izločanja sluzi. Inovativna formula je učinkovita pomoč pri znakih gripe, ki jih povzročajo prehladi, alergije ali okoljski onesnaževalci ter pri posledicah operacij v ORL. Pršilo za nos Otorig® odmaši nosne poti, zmanjša zaporo in uravna izločanje s pospeševanjem osmotske izmenjave, ki podpira prehajanje tekočin iz sluznice in utekočinja sluz, kar olajša njeno odstranjevanje. Njegova formula s sestavino Ozoile® ohranja sluznico dobro hidrirano in ima pomembno razkužilno in zaščitno delovanje z ustvarjanjem mukoadhezivnega lipidnega filma, neugodnega okolja za spremembo mikrobiote, ki obnovi dobro stanje nosnih votlin.


KAKO SE UPORABLJA

1) Odstranite prozorni zaščitni pokrovček (a) in klasični razpršilnik (b) s potegom navzgor.

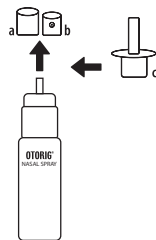

2) Na bat namestite nosni razpršilnik (c).

Po potrebi uporabite 1 ali 2 vpiha pršila za nos Otorig® za vsako nosnico, nežno izpihnite nos in nato ponovite vpihavanje.

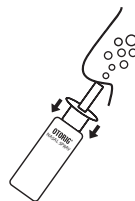

Priporočljivo je, da izdelek uporabite večkrat tekom dneva, tudi v kratkih presledkih. Ponovite uporabo pred spanjem. Na koncu vsake uporabe sperite razpršilnik tako, da ga postavite pod curek vroče vode, nato pa ga pokrijte z zaščitnim pokrovčkom. Ker gre za naravni izdelek, zahvaljujoč nefarmakološkemu mehanizmu delovanja ne povzroča odvisnosti in se lahko uporablja pogosto in dlje časa.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Shranjujte izven dosega otrok. Pripomočka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Ne uporabljajte, če je embalaža na videz poškodovana. Izogibajte se stiku z očmi. V primeru nenamerne- ga stika temeljito sperite z vodo.

Ni znanih primerov preobčutljivosti ali stranskih učinkov. Če pride to tega pojava, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Pred uporabo medicinskega pripomočka si umijte roke. Po uporabi skrbno zaprite stekleničko. Shranjujte na hladnem, suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Rok uporabnosti se nanaša na nedotaknjen in pravilno shranjen izdelek. Po odprtju je priporočljivo uporabiti izdelek v 6 mesecih.

PAKIRANJE

Steklenička z 0,7 fl. OZ.

BREZ GLUTENA - BREZ ALERGENOV - BREZ BARVIL

 Distributer:
MagPharm,
prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Litostrojska 44e,
1000 LJUBLJANA

 ERBAGIL s.r.l.
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 03 01/2023

